



Pairing a single sensor *(Panic button and fall detector pendant)*


Activation d'un dispositif d'urgence *(Bouton panique ou pendentif détecteur de chute)*

1 Press and hold the Cancel Button for five seconds.
Appuyez sur le bouton CANCEL et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes

2 The console will announce: Ready to learn sensor
La console va annoncer : Prêt à mémoriser le capteur

3 Press the button on the sensor
Appuyez sur le bouton du dispositif

4 Console will announce: Sensor learned
La console va annoncer : Capteur mémorisé

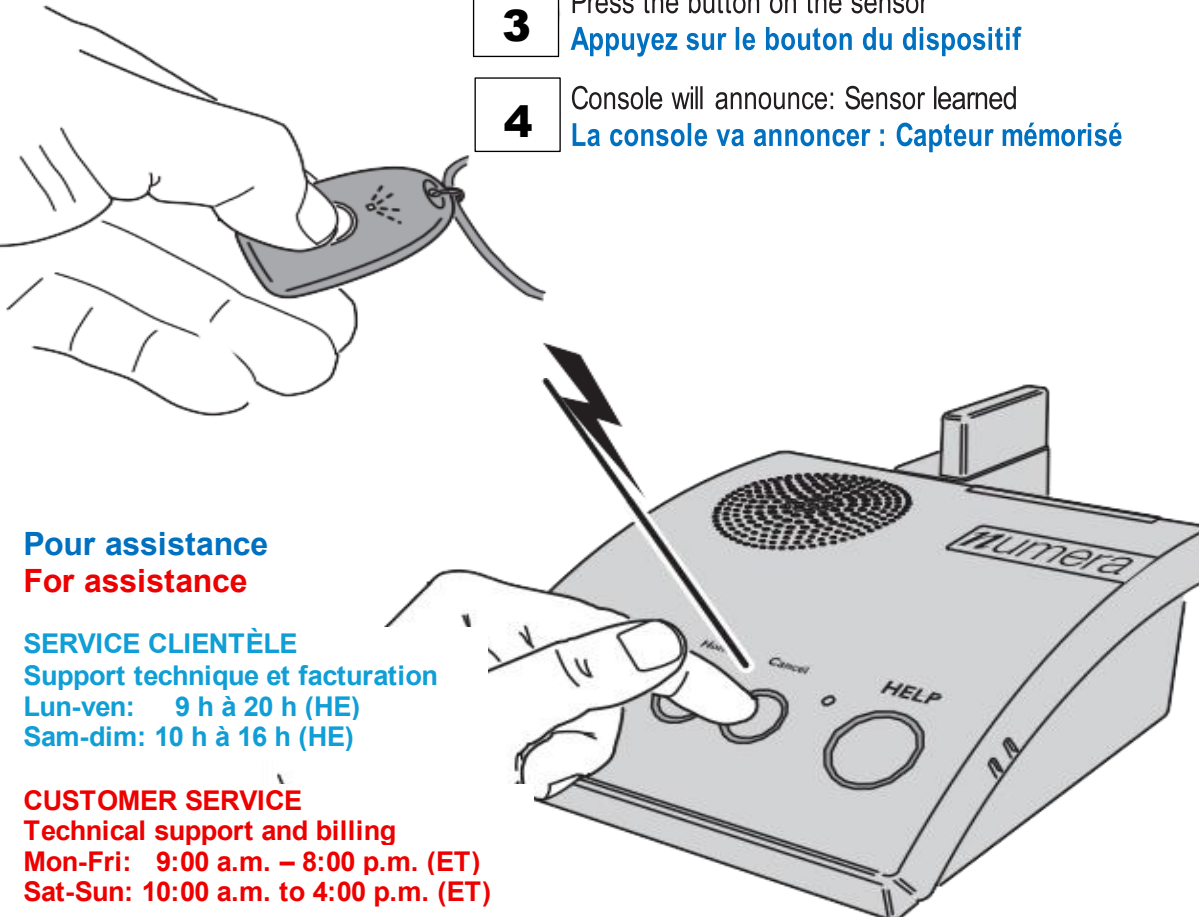

Pour assistance
For assistance


SERVICE CLIENTÈLE
Support technique et facturation
Lun-ven: 9 h à 20 h (HE)
Sam-dim: 10 h à 16 h (HE)

CUSTOMER SERVICE
Technical support and billing
Mon-Fri: 9:00 a.m. – 8:00 p.m. (ET)
Sat-Sun: 10:00 a.m. to 4:00 p.m. (ET)

1-877-575-3555

ERASING ALL PAIRED SENSORS **POUR SUPPRIMER TOUS LES CAPTEURS**

PRESS AND HOLD THE TEST BUTTON FOR FIVE SECONDS.
MAINTENEZ LE BOUTON TEST ENFONCÉ PENDANT 5 SECONDES

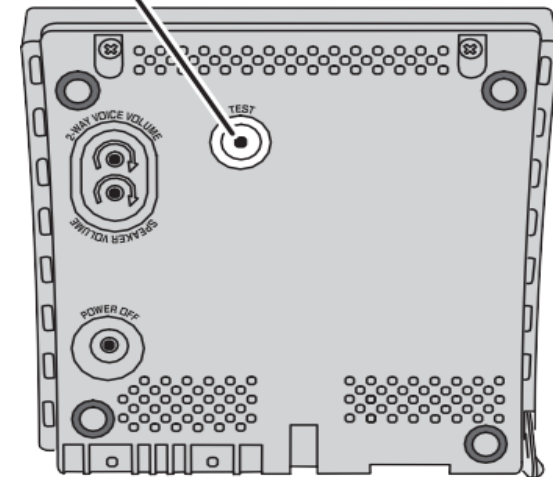

The console will announce: "ZONES RESET."
La console annoncera : « ZONES RÉINITIALISÉES ».

WARNING: This procedure will erase all paired sensors.
ATTENTION: Cette procédure supprimera tous les capteurs mémorisés.